

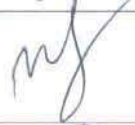
 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	ALUR INSTRUMEN SURGERY DAN LINEN DI KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 064/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 5 Maret 2025	Ditetapkan : Direktur Utama Rumah Sakit  Rumah Sakit Permata Gunung Putri dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Alur instrumen surgery dan linen yang steril maupun kotor dimulai dari ruang penyimpanan (Ruang steril) sampai kamar operasi dan sesudah selesai digunakan (kotor).		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam memberikan prosedur alur instrument surgery dan linen di Kamar Bedah Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Kamar Bedah		
PROSEDUR	1. Pelaksanaan a. Menyiapkan alur instrument surgery dan linen yang steril b. Menyiapkan alur instrument surgery dan linen yang kotor 2. Perangkat Kerja a. Instrumen surgery b. Linen c. Kantong kuning dan kantong hitam d. Desinfektan enzimatik e. Label indicator (external dan internal) f. Box Contener g. Buku ekspedisi 3. Tata Laksana a. Instrumen surgery (alat bedah) dan linen steril diambil dari Ruang Sterilisasi sesuai dengan kebutuhan.		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best & Compassion</i>	ALUR INSTRUMEN SURGERY DAN LINEN DI KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 064/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 2/3

	b. Semua alat dibuka/disiapkan didalam kamar operasi sebelumnya cek terlebih dulu label/external indikatornya. c. Selesai digunakan, linen kotor digulung rapih dan dimasukkan kedalam tempat linen kotor yang sudah di sediakan. d. Khusus untuk instrument selesai digunakan, didekontaminasikan terlebih dahulu menggunakan desinfektan enzimatik dan setelah itu baru dibersihkan sesuai dengan tahapan pemeliharaan. e. Semua instrument bedah dan linen yang kotor di bawa keluar melalui pintu disposal, untuk linen kotor dimasukan ke tmpt linen/kantong hitam dan untuk linen infeksius dimasukan ke plastik kuning. Untuk instrumen bedah di masukan ke box contener tertutup dan ditulis dibuku ekspedisi untuk serah terima dengan ruang sterilisasi dan laundry
UNIT TERKAIT	Pelayanan Medis, Keperawatan, Kebidanan

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	ALUR INSTRUMEN SURGERY DAN LINEN DI KAMAR OPERASI		
	No. Dokumen 064/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dydi Suwandi,AMK	Ka. Unit Bedah		5/3 ²⁵
Menyetujui 1	M1	dr. Hanindyo Riezky Beksono, SpB.M.Ked.Klin	Ka.SMF Bedah		5/3 ²⁵
Menyetujui 2	M2	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		5/3 ²⁵
Menyetujui 3	M3	Ns. Amami, S.Kep, M.Kep	Manager Keperawatan		5/3 ²⁵
Verifikator 1	V1	Irma Fatimah S.kep Ners	SPI		5/3 ²⁵