

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | MEMPROGRAM HEMODIALISIS                            |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>No Dokumen</b><br>017/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025 | <b>No. Revisi :</b><br>00 | <b>Halaman</b><br>1/3 |

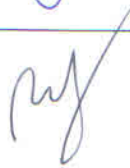
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDAR<br/>OPERASIONAL<br/>PROSEDUR ( SOP )</b> | Tanggal terbit<br><br>5 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ditetapkan<br>Direktur Utama Rumah Sakit<br><br>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes |
| <b>PENGERTIAN</b>                                   | Suatu kegiatan dengan memasukan data-data pasien yang dibutuhkan dalam proses dialisis ke dalam mesin HD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| <b>TUJUAN</b>                                       | 1. Mencapai target ultrafiltrasi, antara lain dengan cara :<br>a. Membuang kelebihan cairan dalam tubuh.<br>b. Berat badan tercapai sesuai dengan berat badan kering (dry weight).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| <b>KEBIJAKAN</b>                                    | Surat Keputusan Direktur RS Permata Gunung Putri Nomor 134/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| <b>PROSEDUR</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perawat mencuci tangan sesuai dengan standar dari WHO</li> <li>Perawat melakukan identifikasi pasien dengan cara :<br/> a. Meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir<br/> b. Periksa dan bandingkan data pada gelang identitas pasien dengan rekam medis jika data sama maka lakukan prosedur.</li> <li>Perawat membandingkan berat badan yang lalu dengan berat badan sekarang.</li> <li>Perawat menekan tombol UF untuk menentukan target cairan yang akan ditarik atau dikeluarkan.</li> <li>Perawat menekan tombol time lift untuk menentukan waktu atau lama dialisis.</li> <li>Perawat memilih program ultrafiltrasi sesuai dengan kondisi keadaan umum pasien, kemudian masukan</li> </ol> |                                                                                                                                                                |

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | MEMPROGRAM HEMODIALISIS                            |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>No Dokumen</b><br>017/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025 | <b>No. Revisi :</b><br>00 | <b>Halaman</b><br>2/3 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>kedalam profile ultrafiltrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Perawat menekan tombol ON di menu UF.</li> <li>8. Perawat memprogram penggunaan heparin yang sesuai dengan keadaan pasien atau masa pendarahan pasien. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perawat menentukan rata-rata penggunaan heparin setiap jam</li> <li>b. Perawat menentukan lama penggunaan heparin (satu jam sebelum akhir dialisis heparin stop).</li> </ol> </li> <li>9. Perawat menekan tombol ON untuk menjalankan pompa heparin</li> <li>10. Perawat mencuci tangan sesuai dengan standar WHO</li> </ol> |
| <b>UNIT TERKAIT</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPJP</li> <li>2. Dokter Pelaksana Dialisis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | MEMPROGRAM HEMODIALISIS       |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                | No Dokumen                    | No. Revisi : | Halaman |
|                                                                                                                                                                | 017/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025 | 00           | 3/3     |

### LEMBAR VERIFIKASI

| PIC         |    | NAMA                                 | JABATAN                              | TANDA TANGAN                                                                          | TANGGAL    |
|-------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Penyusun    | P1 | dr. Ida Rosdiana Pattiasina          | Dokter<br>Pelaksana<br>Unit Dialisis |   | 3 Mei 2025 |
| Menyetujui  | M1 | dr. Wediat Setiawan                  | Manager<br>Pelayanan<br>Medis        |  | 3 Mei 2025 |
| Verifikator | V1 | drg. Praditiyas Dwioktaviani,<br>M.H | Komite Mutu                          |  | 3 Mei 2025 |